


# Epi-Wet

## Bestaat uit


- Epi-wet
- Voedingsadapter
- Aansluitkabel vochtdetectielaken
- Vochtdetectielaken

## Aansluiten

1. Plaats het sensorlaken (droog) met de drukknopjes naar boven toe op het laken op de plaats waar vochtverlies wordt verwacht. Steek de eindstukken onder het matras, zodat het sensorlaken vastligt (Figuur 2).
2. Controleer of de voedingsadapter aangesloten is op een stopcontact (netvoeding) en aan de Epi-Wet (Figuur 1)
3. Sluit de aansluitkabel van het vochtdetectielaken aan door de slotjes over de drukknopjes heen te drukken (Figuur 2).
4. Controleer of het andere uiteinde van de aansluitkabel van het vochtdetectielaken is aangesloten op de Epi-Wet. Indien dit niet het geval is, dan mag deze aan de achterzijde van de Epi-wet worden aangesloten, zie figuur 1 welke aansluiting hiervoor gebruikt moet worden.
5. Zet de Epi-wet aan door de knop "⏻" enkele seconden in te drukken. Hierdoor zal er een groene led moeten gaan branden, dit is het teken dat de Epi-Wet klaar is voor gebruik. Wanneer er een rode led brand staat de Epi-Wet in alarmmodus.
6. Het alarm kan afgezet worden door tegelijkertijd op "L" en "H" te drukken. Bij een alarmmelding door vochtdetectie moet eerst het sensorlaken vervangen voor een droog exemplaar voordat het alarm afgezet wordt, mocht dat niet gebeuren dan zal er geen nieuw alarm worden gedetecteerd.

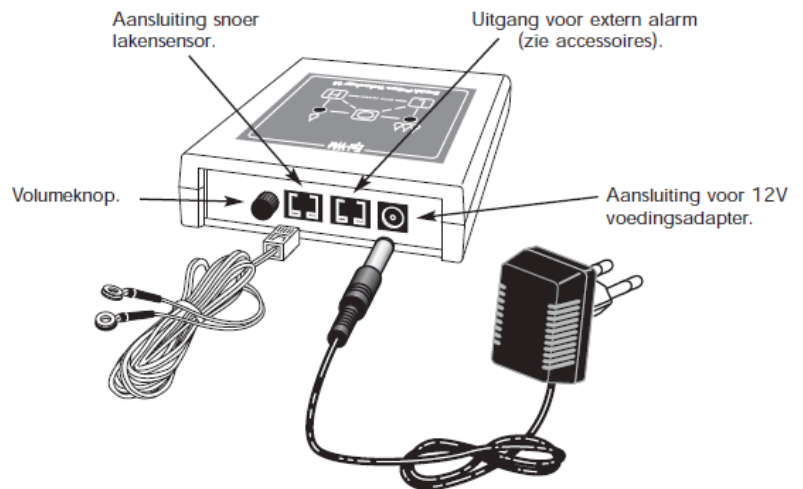


Figuur 1

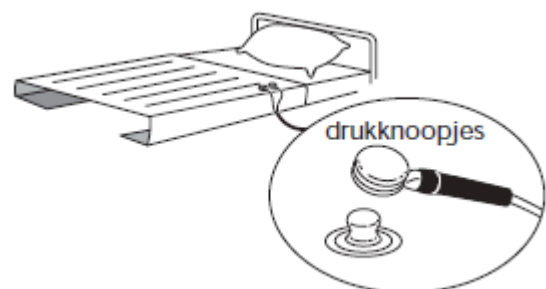

Figuur 2

## Instellen vochtgevoeligheid

De Epi-Wet kan ingesteld worden om te reageren op een lage of hoge vochtgevoeligheid. Het alarm reageert bij het kiezen van een lage vochtgevoeligheid pas bij een grote hoeveelheid vocht. Een lage vochtgevoeligheid kan worden gekozen als de gebruiker veel zweet tijdens de slaap. Het gevoeligheidsniveau kan worden ingesteld door de "L" knop (lage gevoeligheid) of de "H" knop (hoge gevoeligheid) ingedrukt te houden terwijl u kort op "⏻" drukt.

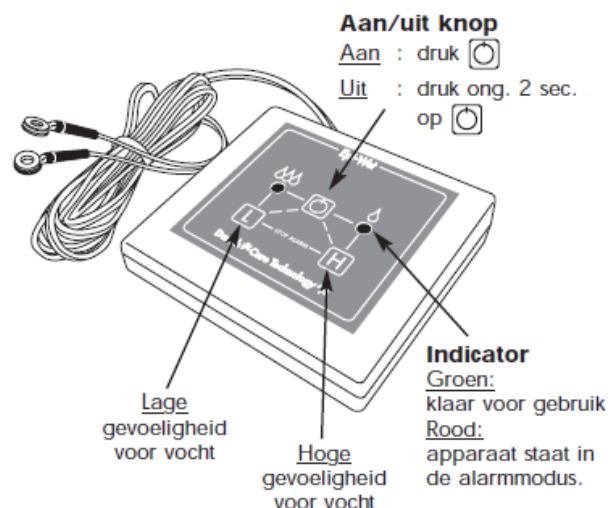

Figuur 3