

## Wet-Watcher (Epi-wet)

### Bestaat uit

- Wet-Watcher (Figuur 1)
- Vochtdetectielaken
- Aansluitkabel vochtdetectielaken

### Aansluiten

1. Plaats het sensorlaken (droog) met de drukknopjes naar boven toe op het laken op de plaats waar vochtverlies wordt verwacht. Steek de eindstukken onder het matras, zodat het sensorlaken vastligt (Figuur 2).
2. Sluit de aansluitkabel van het vochtdetectielaken aan door de slotjes over de drukknopjes heen te drukken (Figuur 2).
3. Sluit, indien dat nog niet is gedaan, het andere uiteinde van deze kabel aan op voorzijde van de Wet-Watcher.
4. Zet de Wet-watcher aan. Dit doe je door de schakelaar op "I" te zetten.
  - De batterijled op de Wet-watcher (aangegeven d.m.v. batt) moet nu twee seconden groen oplichten. Wanneer de led weer uitschakelt is de melding actief.




Figuur 1

### Reset na alarmmelding

Wanneer er een alarmmelding is afgegeven vanuit de Wet-Watcher is het voor het maken van een nieuw alarm noodzakelijk dat deze gereset wordt. Zet hiervoor de Wet-Watcher uit (schakelaar naar "0") en vervang het natte sensorlaken voor een droog exemplaar. Ga vervolgens weer verder bij stap 1 van het aansluiten hierboven uitgelegd.

### Batterij

Wanneer de batterij leeg raakt kan dit worden gesignaleerd doordat de batterijled (Batt) op de Epi-wet rood gaat knipperen. In dit geval moet de batterij binnen enkele dagen worden vervangen.

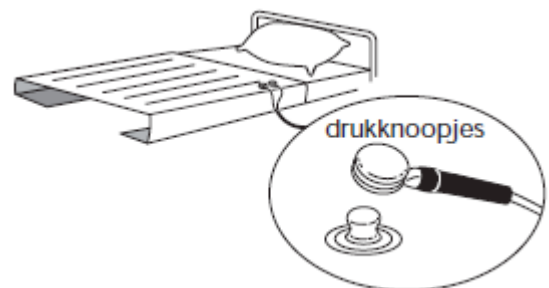

Figuur 2